



MUCHAS GRACIAS POR HABER ELEGIDO AMMO

Antes de comenzar a utilizar tu WAVE por primera vez, te recomendamos que leas estas recomendaciones de uso para que puedas familiarizarte con él. Están pensadas para ayudarte desde el principio. Wave es el aliado perfecto para tu salud íntima. Elegante, suave y discreto tiene un diseño ideal para cualquier perfil de mujer. Está fabricado con silicona de grado médico (en una sola pieza, segura, de tacto suave, fácil de limpiar y sin olores) , es totalmente resistente al agua y tiene una intensidad de sonido de menos de 50dB.

QUÉ ES WAVE

Wave es un dispositivo para estimulación de clítoris a través de ondas sónicas en lugar de las clásicas vibraciones. Estas ondas rebotan en el propio dispositivo y llegan hasta tu cuerpo para estimularlo sin necesidad de contacto.

BENEFICIOS DE UTILIZAR WAVE:

- Recomendado para mujeres que no llegan o les cuesta llegar a orgasmo.
- Favorece el autoconocimiento a nivel anatómico y mejora la sexualidad, no centrándose en la penetración como única forma de mantener relaciones sexuales.
- Estimulación sin contacto directo con el clítoris. Esto hace que sea menos probable que genere hipersensibilidad e irritación que los estimuladores con vibración.
- Perfecto para descubrir nuevas sensaciones.
- Mejora el deseo sexual y motiva a reanudar la vida erótica, a solas o en pareja.
- Facilita la relajación. El orgasmo es beneficioso para el cuidado y fortalecimiento del suelo pélvico.
- Favorece la circulación sanguínea en la zona pélvica, y por tanto mejora la lubricación vaginal natural, evitando la sequedad.
- Mejora la elasticidad de las paredes vaginales.
- Ayuda a alcanzar el orgasmo y multiorgasmo femenino.
- Proporciona sensaciones de placer y bienestar.

PROGRAMAS:

Wave ofrece 9 modos distintos de estimulación sónica que se cambian fácilmente utilizando el botón ON/OFF (iluminación roja). En modos 1-2-3-4 se pueden seleccionar 3 niveles diferentes de intensidad (Baja, media y alta) utilizando los botones + o -. (iluminación azul).

Modos 1 Los patrones de estimulación continua, así como el orgasmo, tienen un efecto analgésico útil para tratar procesos de dolor e hipersensibilidad.

Modos 2, 3 y 4 Los patrones de estimulación discontinua activan la musculatura eréctil del clítoris por lo que es útil para tratar atroñas. Estos tejidos del clítoris rodean por la cara posterior a la uretra dándole soporte y creando el complejo uretrovaginal.

Modos 5 y 6 Los patrones que aumentan y descienden la intensidad de forma continuada promueve una mayor irrigación sanguínea de la vulva incluyendo el clítoris en toda su extensión y también de la vagina. Esto es especialmente útil en el tratamiento de la atrofia vaginal y otras dificultades para la lubricación. Al ofrecer una variación en la estimulación son altamente placenteros.

Modos 7 y 8 Los patrones de estimulación ascendente aumentan la sensibilidad por lo que resultan útiles para tratar la falta de sensibilidad, el hipertono, las dificultades para alcanzar el orgasmo.

Modo 9 Los patrones aleatorios producen sensaciones inesperadas y novedosas muy estimulantes que facilitan el orgasmo. En ocasiones, nuestro cuerpo puede habituarse y necesitar cada vez más intensidad. Este programa previene este síndrome de habituación al variar tanto los ritmos como la intensidad.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS:

- Precisa ubicar el clítoris por lo que ayuda a conocer todas las partes de la vulva.
- Aumenta la conexión con la zona pélvica y facilita la propiocepción, a ser consciente de la respuesta del propio cuerpo a la estimulación.
- Incrementa la vascularización del clítoris en toda su extensión y la vagina.
- Promueve la lubricación natural, por lo que es ideal para mujeres con atrofia vaginal, procesos de cáncer o postparto difícil.
- Es un aliado en el tratamiento del dolor en dificultades sexuales como la vulvodinia y la dispareunia.
- Activa de forma rápida el reflejo del orgasmo por lo que es útil en el tratamiento de las dificultades para alcanzar el orgasmo.
- Muy útil en el tratamiento del hipertono de la pelvis, atroñas del clítoris y de la uretra.
- Ayuda a tratar la anorgasmia o dificultades para alcanzar el orgasmo descartando causas orgánicas.
- La activación de la circulación sanguínea y del orgasmo ayudan a mejorar el tono y fortalecimiento del suelo pélvico.
- Ayuda al acercamiento paulatino a la vida erótica para aquellas mujeres que hayan abandonado la actividad sexual por miedo a sentir dolor, ya que Wave estimula sin contacto.
- Motiva a la mujer para conseguir un buen aprendizaje y un adecuado cumplimiento del trabajo recomendado por el o la profesional.

QUÉ HACE ESPECIAL AL WAVE:

- Tamaño reducido (79mm)
- Ligero, solo 92gr.
- Diseño discreto.
- Silencioso, menos de 50db
- Ergonómico. Se adapta a tu anatomía.
- Fabricado en silicona de grado médico extremadamente suave.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de manejar. Botonera iluminada con opción de subir y bajar intensidad en los modos con esta opción (1,2,3,4)
- Resistente al agua.


MODO 1 (continuo)

SUCCIÓN CONTINUA CON POSIBILIDAD DE VARIAR LA INTENSIDAD CON EL BOTÓN + Y -




MODO 3 (pulsaciones medias)

SUCCIÓN POR PULSACIONES CON POSIBILIDAD DE VARIAR LA INTENSIDAD CON EL BOTÓN + Y - 2 segundo encendido, 0,5 descanso

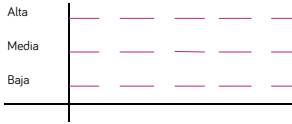

MODO 5 (onda baja)

SUBIDA Y CAÍDA CONSTANTE DE LA INTENSIDAD DE SUCCIÓN DE MEDIA A BAJA SIN ROTURAS. 2 segundos arriba, 2 segundos abajo.

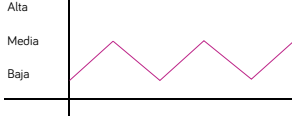

MODO 2 (pulsaciones cortas)

SUCCIÓN POR PULSACIONES CON POSIBILIDAD DE VARIAR LA INTENSIDAD CON EL BOTÓN + Y - 1 segundo encendido, 0,5 descanso




MODO 4 (pulsaciones largas)

SUCCIÓN POR PULSACIONES CON POSIBILIDAD DE VARIAR LA INTENSIDAD CON EL BOTÓN + Y - 3 segundo encendido, 0,5 descanso




MODO 6 (onda alta)

SUBIDA Y CAÍDA CONSTANTE DE LA INTENSIDAD DE SUCCIÓN DE BAJA A ALTA Y DE ALTA A BAJA SIN ROTURA. 2 segundos arriba, 2 segundos abajo.

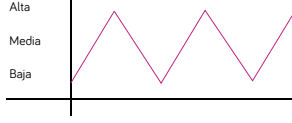

- 17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener experiencias nuevas con cada uno.
- Relieves dibujados en los laterales para facilitar su agarre y evitar el deslizamiento.

DECUBRE WAVE:

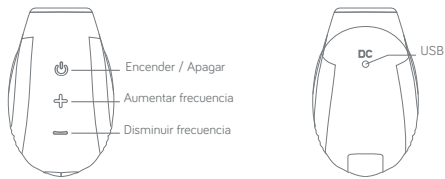

CÓMO SE UTILIZA

Antes de usarlo carga tu Wave. Encontrarás un cable con conexión USB en la caja. Debes insertar el cable en el puerto de recarga que encontrarás en la base del Wave, está indicado con las letras DC. Enchufa el cargador a la corriente eléctrica. Durante la carga se encenderá un luz led roja en el botón on/off y parpadeará hasta que la carga este completa. Una vez esté cargado completamente, la luz permanecerá constante.


Wave tiene un modo de protección automática que se acciona cuando se recarga y hace que no funcione mientras se está cargando hasta que se retire de nuevo el cargador.

Te recomendamos utilizar un hidratante con base agua aplicándolo sobre tu cuerpo antes de su uso. El hidratante íntimo Aloe Vera - Camomila es ideal para una experiencia más satisfactoria.

Separa ligeramente los labios para que quede expuesto el clítoris. Coloca el Wave de modo que la boquilla quede alrededor del clítoris. Presiona el botón on/off durante 2 segundos (se iluminará una luz roja bajo este botón).

MODO 7 (despeque bajo)

SUBIDA CONSTANTE DESDE EL FONDO DE LA INTENSIDAD DE SUCCIÓN DE BAJA A ALTA SIN INTERRUPCIONES. 2 segundos arriba, 2 segundos abajo.

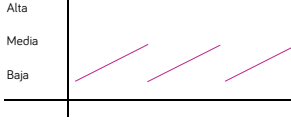


MODO 9 (rock& roll)

COMBINACIÓN ALEATORIA DE LOS MODOS 1 A 8


MODO 8 (despeque alto)

SUBIDA CONSTANTE DESDE EL FONDO DE LA INTENSIDAD DE SUCCIÓN DE BAJA A ALTA SIN INTERRUPCIONES. 2 segundos arriba, 2 segundos abajo.

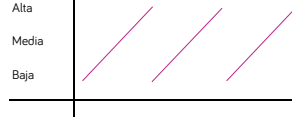

Se maneja de forma muy intuitiva. Selecciona el modo con el botón ON/OFF y cambia de intensidad con los botones más y menos (se iluminará una luz azul). Los modos 1-2-3-4 son los que permiten el cambio de intensidad. Experimenta 100% de placer. Para apagar el dispositivo mantén pulsado en botón on/off durante al menos 2 segundos.

No olvides limpiar bien con agua templada y jabón neutro el dispositivo antes y después de cada uso.

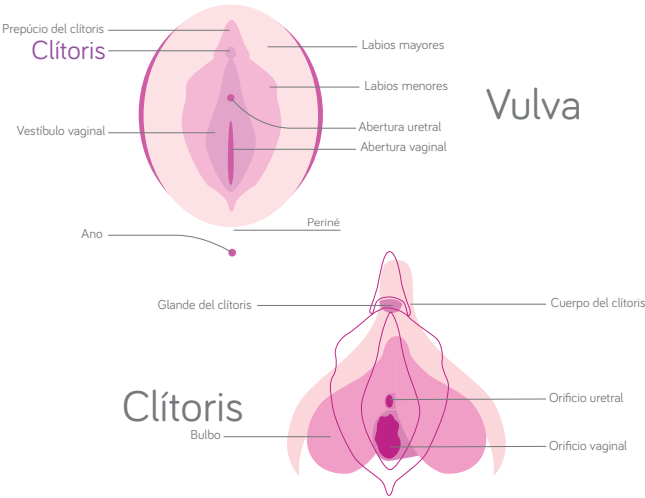

Mantener tu wave en un lugar seco. No lo xpongas a calor extremo y no lo dejes mucho tiempo bajo exposición solar. Resistente al agua pero no sumergible, no debe entrar agua en el punto de carga. Guardar de manera individual en su bolsa transpirable confeccionada a base de algodón orgánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Silicona de grado médico
- Medidas: 37mm x 59,5mm x 77mm
- Diámetro de la boquilla: 14mm
- Peso: 92gr
- Flexibilidad: rígido
- Tipo de controlador: Botonera on/off, (luz roja) más intensidad, menos intensidad (luz aul)
- Silencioso: <50db.
- Resistente al agua
- 17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener experiencias nuevas con cada uno.
- Alimentación: Batería de litio
- Voltaje de entrada: 5V
- Corriente de entrada: 1-2A

Si quieres saber más, visita nuestra web



www.ammolondon.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al estar fabricado con silicona de grado médico, el Wave es totalmente seguro para tu cuerpo. Está fabricado en una sola pieza de silicona para facilitar su limpieza. Te recomendamos siempre que antes y después de cada uso lo laves muy bien con agua tibia y jabón neutro durante al menos 30 segundos. Puedes secarlo con una toalla que no deje residuos o dejarlo secar al aire.

Si utilizas algún lubricante, recomendamos que sea algún hidratante íntimo con base de agua (el Hidratante íntimo Aloe Vera-Camomila no mancha, no deja residuos y es fácil de limpiar). No utilizar con lubricante de silicona, aceites o vaselinas para no dañar la superficie.



THANK YOU SO MUCH FOR CHOOSING AMMO

Before you start using your WAVE for the first time, we recommend that you read these recommendations for use so that you can familiarize yourself with it. They are designed to help you from the beginning. Wave is the perfect ally for your intimate health. Elegant, soft and discreet, it has an ideal design for any woman's profile. It is made of medical grade silicone (in one piece, safe, soft touch, easy to clean and odorless), it is fully waterproof and has a sound intensity of less than 50dB.

WHAT IS WAVE

Wave is a device for stimulating the clitoris through sonic waves instead of the classic vibrations. These waves bounce off in the device itself and reach your body to stimulate it without the need for contact.

BENEFITS OF USING WAVE:

- Recommended for women who do not reach or have trouble reaching orgasm.
- It helps self-knowledge at the anatomical level and improves sexuality, not focusing on penetration as the only way to have sex.
- Stimulation without direct contact with the clitoris. This makes it less likely to cause hypersensitivity and irritation than vibrating stimulators.
- Perfect to discover new sensations.
- Improves sexual desire and motivates to resume erotic life, alone or as a couple.
- Facilitates relaxation. Orgasm is beneficial for the care and strengthening of the pelvic floor.
- It favors blood circulation in the pelvic area, and therefore improves natural vaginal lubrication, avoiding dryness.
- Improves the elasticity of the vaginal walls.
- Helps to achieve female orgasm and multi-orgasm.
- Provides feelings of pleasure and well-being.

PROGRAMS:

Wave offers 9 different modes of sonic stimulation that are easily changed using the ON / OFF button (red illumination). In 1-2-3-4 modes you can select 3 different intensity levels (Low, Medium and High) using the + or - buttons. (blue lighting).

Modes 1 Continuous stimulation patterns, as well as orgasm, have a useful analgesic effect in treating pain and hypersensitivity processes.

Modes 2, 3, and 4 Discontinuous stimulation patterns activate the erectile musculature of the clitoris and are therefore useful for treating atrophies. These tissues of the clitoris surround the posterior aspect of the urethra, supporting it and creating the urethrovaginal complex.

Modes 5 and 6 Continuously increasing and decreasing patterns promote increased blood supply to the vulva, including the entire clitoris and vagina. This is especially helpful in treating vaginal atrophy and other lubrication difficulties. By offering a variation in stimulation they are highly enjoyable.

Modes 7 and 8 Ascending stimulation patterns increase sensitivity and are therefore useful for treating lack of sensitivity, hypertone, difficulties reaching orgasm.

Mode 9 Random patterns produce highly stimulating, new and unexpected sensations that facilitate orgasm. Sometimes our body can get used to it and need more and more intensity. This program prevents this habituation syndrome by varying both rhythms and intensity.

THERAPEUTIC APPLICATIONS:


- Accurately locate the clitoris so it helps to know all parts of the vulva.
- It increases the connection with the pelvic area and facilitates proprioception, to be aware of the body's own response to stimulation.
- It increases the vascularity of the clitoris in all its extension and the vagina.
- It promotes natural lubrication, making it ideal for women with vaginal atrophy, cancer processes or difficult postpartum.
- It is an ally in the treatment of pain in sexual difficulties such as vulvodynia and dyspareunia.
- It quickly activates the orgasm reflex, which is why it is useful in treating difficulties in reaching orgasm.
- Very useful in the treatment of hypertone of the pelvis, atrophies of the clitoris and the urethra.
- It helps to treat anorgasmia or difficulties in reaching orgasm, ruling out organic causes.
- The activation of blood circulation and orgasm help to improve the tone and strengthening of the pelvic floor.
- It promotes a gradual approach to erotic life for those women who have abandoned sexual activity for fear of feeling pain, since Wave stimulates without contact.
- Motivates the woman to get a good learning and an adequate fulfillment of the work recommended by the professional.

WHAT MAKES WAVE SPECIAL:

- Small size (79mm)
- Lightweight, only 92gr.
- Discreet design.
- Silent, less than 50db
- Ergonomic. It adapts to your anatomy.
- Made of extremely soft medical grade silicone.
- Easy to clean.
- Easy to handle. Illuminated keypad with option to raise and lower intensity in modes with this option (1,2,3,4)
- Waterproof.

- 17 different routines. (9 different modes and 3 intensities (modes 1 to 4)) to have experiences new with each one.
- Reliefs drawn on the sides to facilitate its grip and avoid slipping.

DISCOVER WAVE:

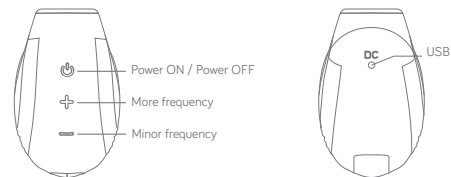


HOW IS IT USED

Before using it, charge your Wave. You will find a cable with a USB connection in the box. You must insert the cable into the charging port that you will find at the base of the Wave, it is indicated by the letters DC.

Spread your lips slightly to expose your clitoris. Position the Wave so that the mouthpiece is around the clitoris. Press the on / off button for 2 seconds (a red light will illuminate under this button). It is handled in a very intuitive way. Select the mode with the ON / OFF button and change intensity with the plus and minus buttons (a blue light will illuminate). Modes 1-2-3-4 are those that allow intensity change. Experience 100% pleasure. To turn off the device, press and hold the on / off button for at least 2 seconds.

Do not forget to clean the device well with warm water and mild soap before and after each use.

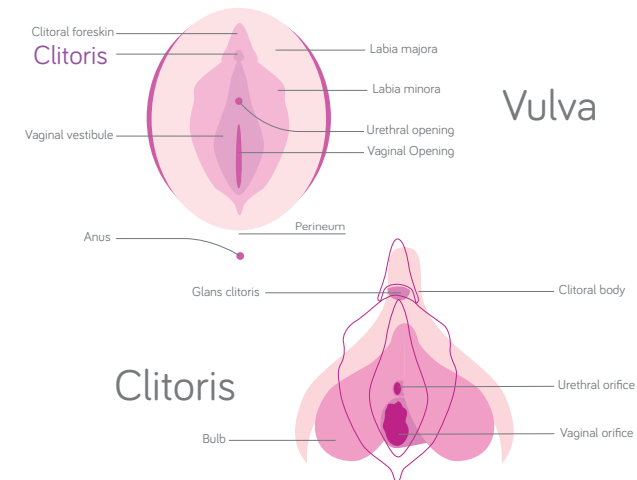

Vulva

Clitoris

MODE 7 (fly low)

CONSTANT RISE FROM THE BOTTOM OF THE SUCTION INTENSITY FROM LOW TO HIGH WITHOUT INTERRUPTIONS 2 seconds up, 2 seconds up



MODE 8 (fly high)

CONSTANT RISE FROM THE BOTTOM OF THE SUCTION INTENSITY FROM LOW TO HIGH WITHOUT INTERRUPTIONS 2 seconds up, 2 seconds up




MODE 9 (rock& roll)

A RANDOM COMBINATION OF MODES 1 TO 8


MODE 1 (continuous)

CONTINUOUS SUCTION WITH THE POSSIBILITY OF VARYING INTENSITY WITH THE + AND - BUTTON

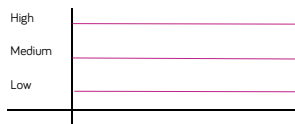


MODE 2 (short pulsations)

SUCTION BY PULSATIONS WITH POSSIBILITY OF VARYING INTENSITY WITH THE + AND - BUTTON 1 second on, 0,5 second rest

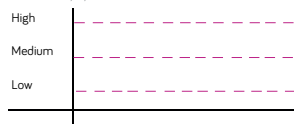


MODE 3 (medium pulsations)

SUCTION BY PULSATIONS WITH POSSIBILITY OF VARYING INTENSITY WITH THE + AND - BUTTON 2 seconds on, 0,5 seconds rest

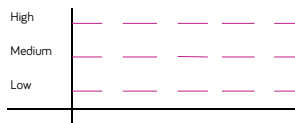


MODE 4 (long pulsations)

SUCTION BY PULSATIONS WITH POSSIBILITY OF VARYING INTENSITY WITH THE + AND - BUTTON 3 seconds on, 0,5 seconds rest

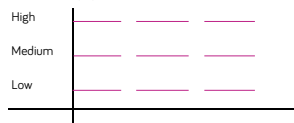


MODE 5 (long pulsations)

CONSTANT RISE AND FALL OF THE SUCTION INTENSITY FROM MEDIUM TO LOW WITHOUT BREAKS 2 seconds up, 2 seconds down

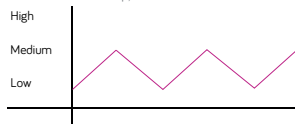

MODE 6 (high wave)

CONSTANT RISE AND FALL OF THE SUCTION INTENSITY FROM LOW TO HIGH AND FROM HIGH TO LOW WITHOUT BREAKS 2 seconds up, 2 seconds down

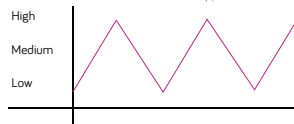

CLEANING AND MAINTENANCE

Being made of medical grade silicone, Wave is totally safe for your body. It is made of a single piece of silicone to facilitate cleaning. We always recommend that before and after each use you wash it very well with warm water and mild soap for at least 30 seconds. You can dry it with a towel that does not leave residue or let it air dry.

If you use a lubricant, we recommend using a water-based intimate moisturizer (Aloe Vera-Chamomile Intimate Moisturizer does not stain, leaves no residue and is easy to clean). Do not use with silicone lubricant, oils or vaseline to avoid damaging the surface.

Keep your wave in a dry place. Do not expose it to extreme heat and do not leave it in the sun for a long time. Splashproof but not submersible, no water should enter the charging point. Store individually in its breathable bag made of organic cotton.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Material: Medical Grade Silicone
- Measurements: 37mm x 59,5mm x 77mm
- Nozzle diameter: 14mm
- Weight: 92gr
- Flexibility: rigid
- Controller type: Button on / off, (red light) more intensity, less intensity (blue light)
- Silent: <50db.
- Splashproof
- 17 different routines. (9 different modes and 3 intensities (modes 1 to 4)) to have new experiences with each one.
- Power: lithium battery
- Input voltage: 5V
- Input current: 1-2A

If you want to know more, visit our website



www.ammolondon.com